



## 如何在 Acta start 中导出好看的图

### 一、直接导出 PDF。


#### 1. 在操作界面下点击 Tools——Evaluation

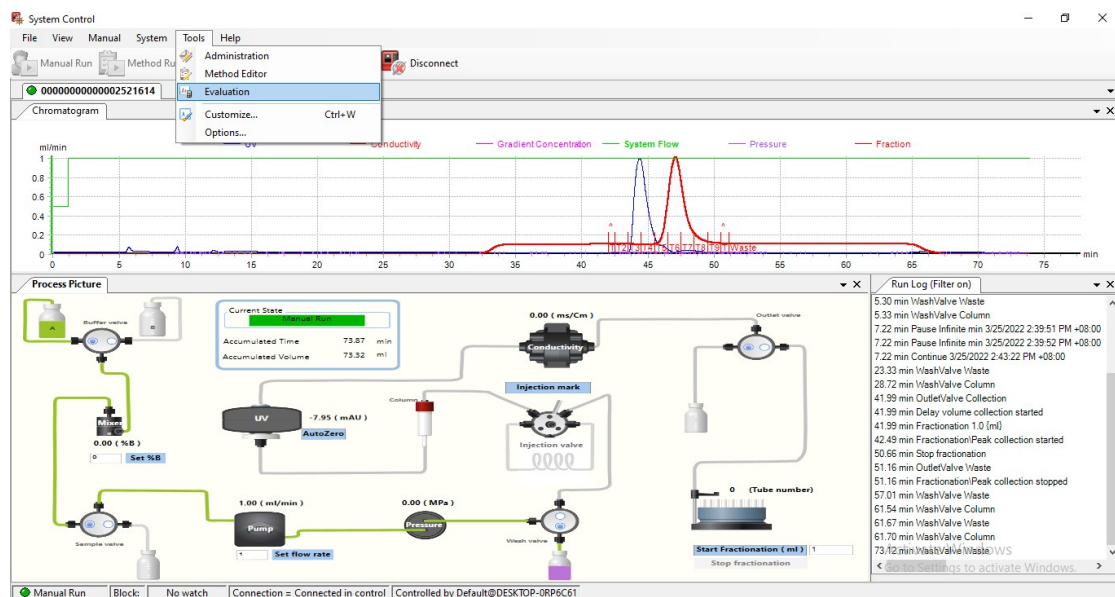


#### 2. 在 Evaluation 中点击 Open——Open Result

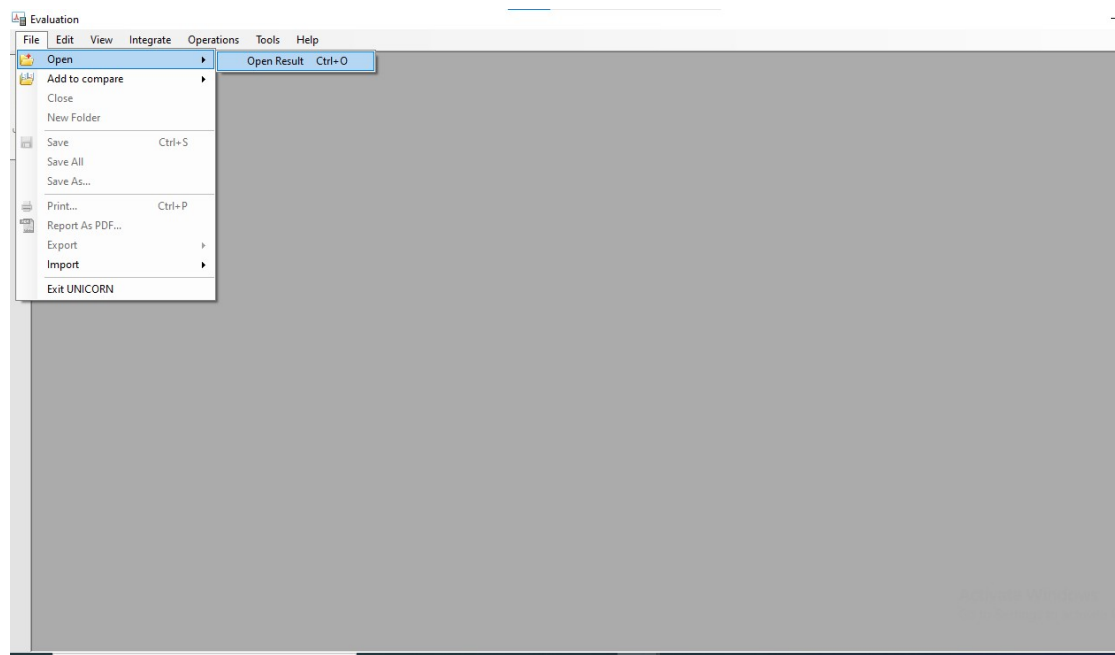


### 3. 在 Recent Runs 中 Recent Runs 中打开图像

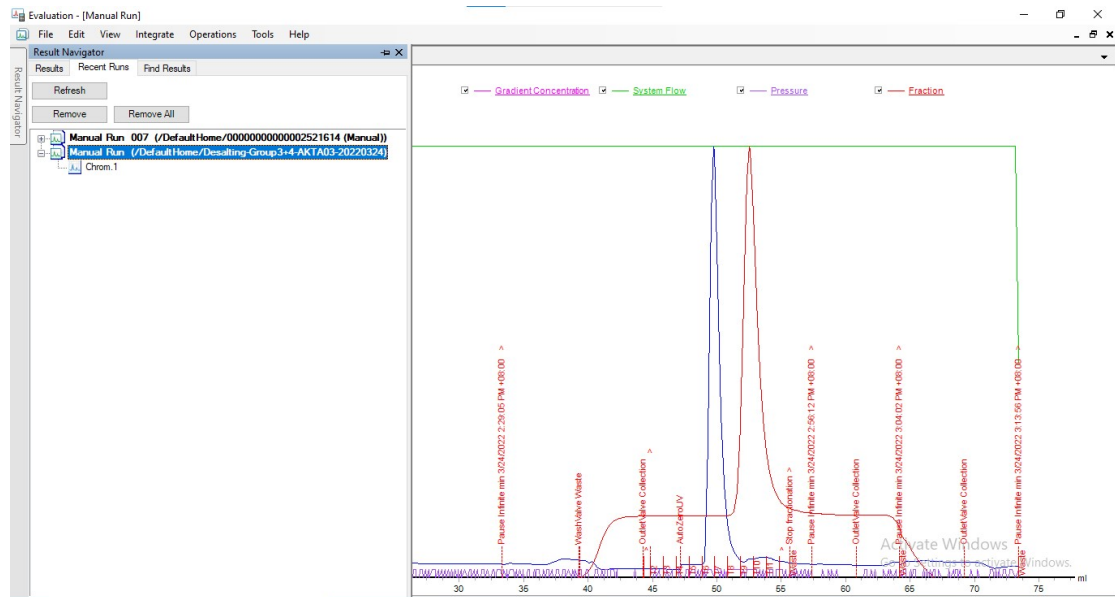

### 4. 在 File 里打开 Print。（为了保证生成的图像不杂乱，只需要选中所要保存的图像比如 UV 和 Conductivity，其他的选项比如 Pressure，System Flow 等可以不勾选。）

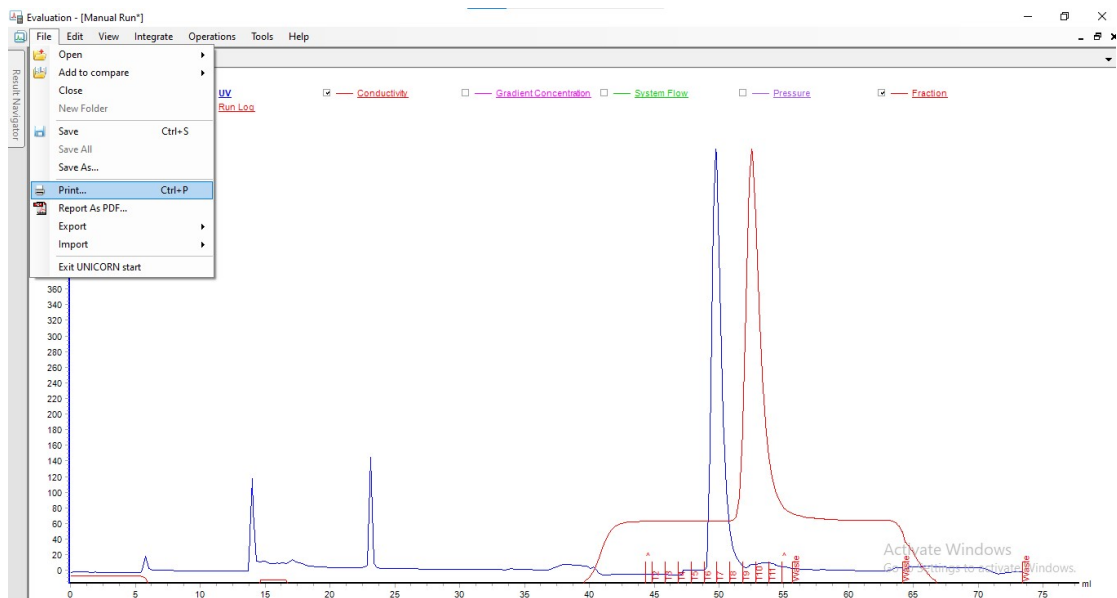


5. 在 Print 界面中打开 Properties，将 Portrait 改成 Landscape。后点击 Preview 后导出 PDF 即可。

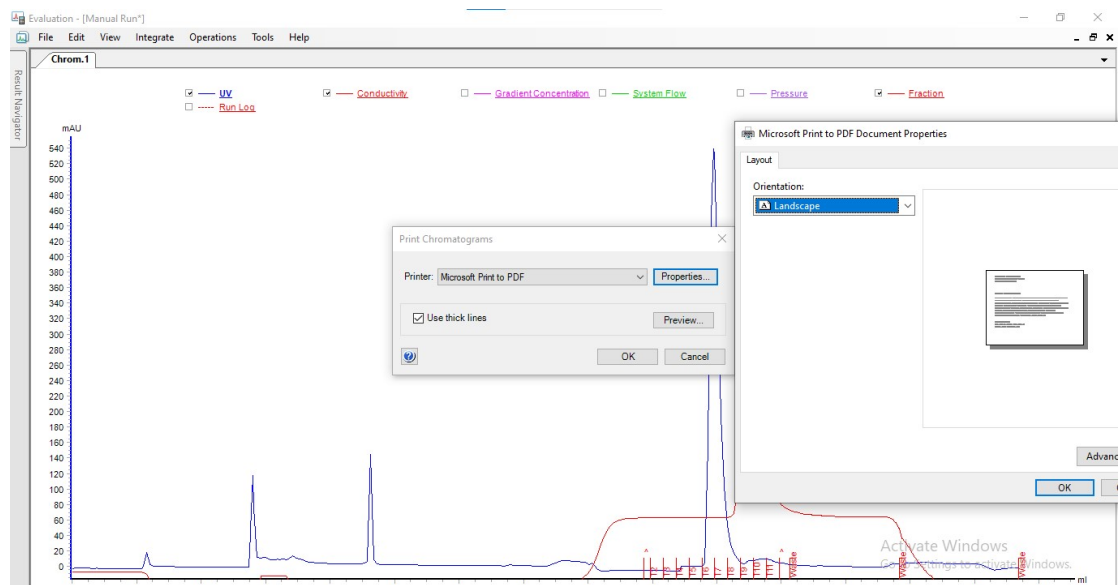


## 二、导出数据，用相关软件作图。


1. 在 Evaluation 操作界面中点击 Export——To UNICORN——Curves。

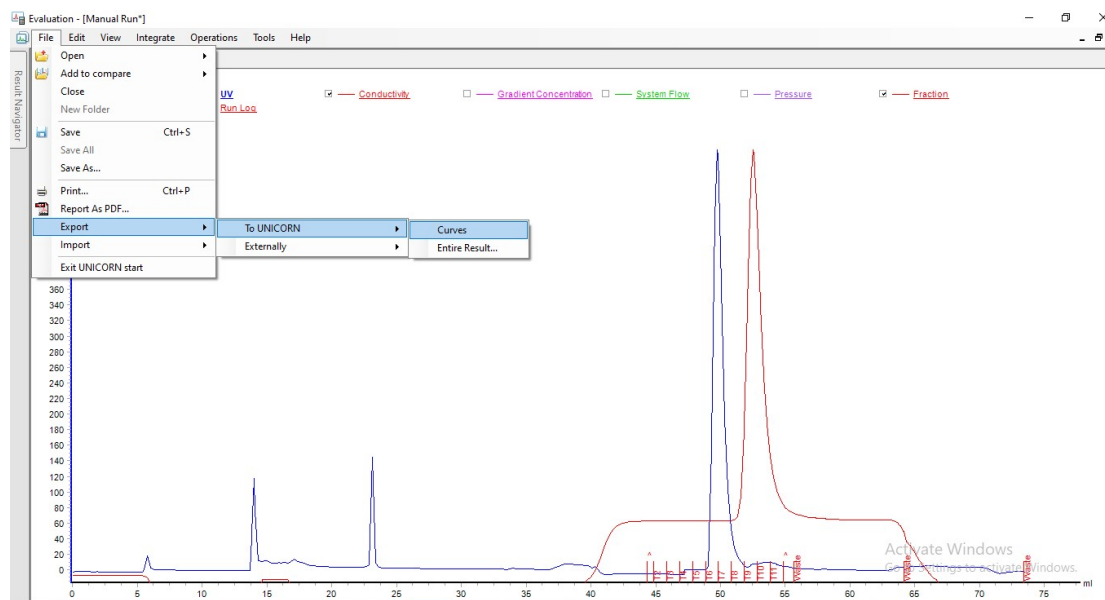

2. 在 Export Curves 中选择要导出的数据，例如 UV, Conductivity 等。

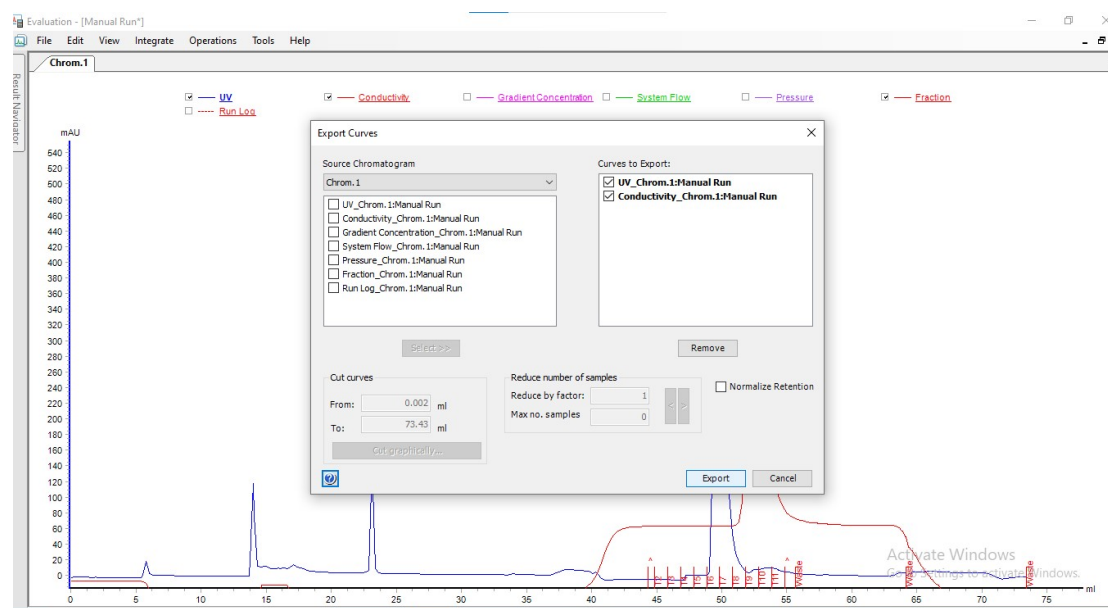

3. 点击 Export 后，选择文件类型，可以将数据保存成 .asc 格式，选择要保存的位置，点击保存即可。

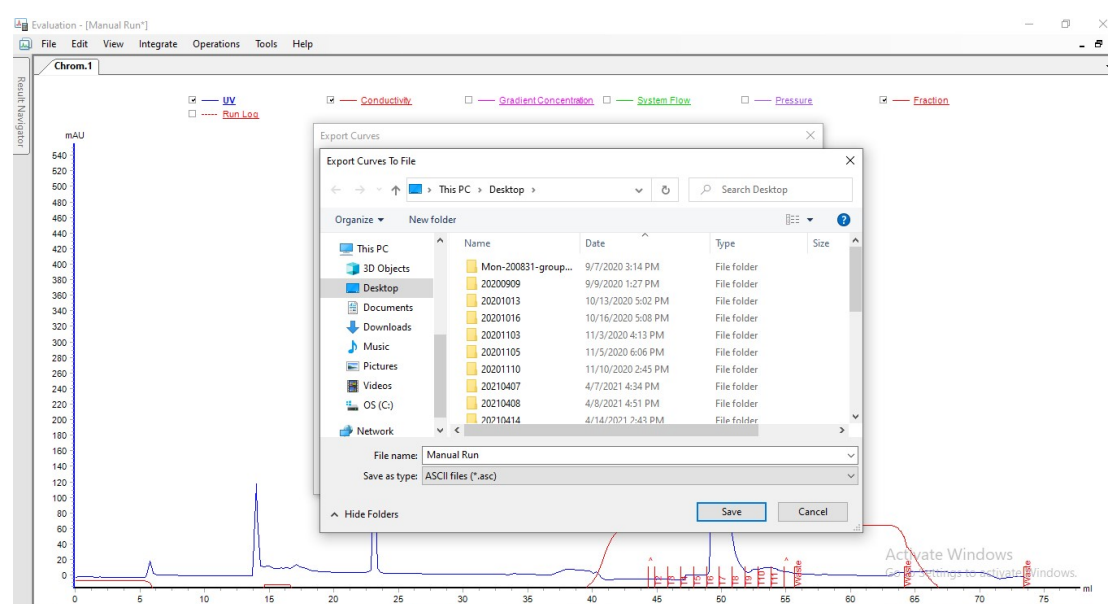

注：

以上两种方法选择一种方式保存数据即可，第二种导出的数据用软件做图会更加专业。生成的文件可以通过邮件发到自己邮箱里保存。